


# Программа «Чибис»

Предназначена для диагностики нарушений бинокулярного стереозрения, функционального лечения бинокулярных расстройств.

Лечебное действие программы основано на стимуляции координированной деятельности левого и правого зрительных каналов за счет использования чисто бинокулярных зрительных стимулов – стереограмм из случайных точек, которые могут успешно восприниматься только при согласованной работе двух глаз.

Все тесты и упражнения построены по единой схеме последовательного предъявления стереограмм для опознавания закодированных изображений, трудность узнавания которых прогрессивно нарастает.

Посмотрите на рисунок справа через очки с синим (слева) и красным (справа) фильтром.

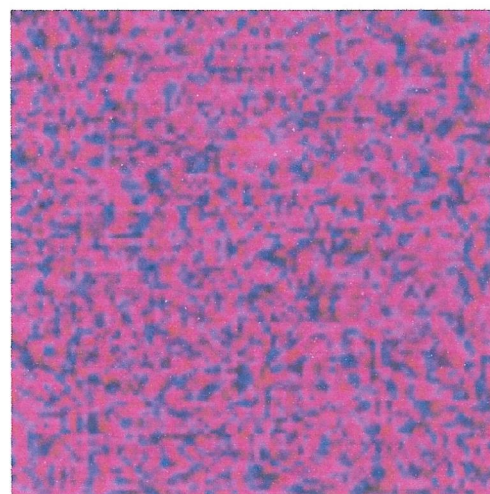

Программа рассчитана на работу в операционной среде Windows 9x -- NT -- XP, не требовательна к системным ресурсам. Тип монитора значения не имеет, можно даже работать с собственными цветоделительными очками.

Рекомендуется подстройка цветовой палитры в зависимости от конкретной аппаратуры и личных предпочтений пользователя (более или менее контрастное, яркое изображение). Процедуры настройки, осуществляемые непосредственно из программы и в ней же сохраняемые (т.е. эти настройки не влияют на изображение в других приложениях), подробно описаны в руководстве пользователя.